



Instruções de uso
Instructions for use
Gebrauchsanweisung


Prolongamentos
Extension lines
Infusionsverlängerungen

PMH-26P-300TF-01

Revisão: 00

EN	PT	DE
<p> Instructions for use:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Open the individual product package with all aseptic care. - Connect to the necessary infusion line. - Purge the system. Make sure that there are no air-bubbles in the infusion system. - After use, the products should be disposed of in accordance with local ecological regulations. <p>Characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Free of latex and phthalates. • Non-pyrogenic. • Medical device for single use. <p>Intended use: This product is intended to channeling liquids for the purpose of infusion or administration into the body. The intended users of this product are physicians and nurses.</p> <p>Warnings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not use if the packaged is opened or damaged. • Do not use if protective caps are loose or missing. • Verify all connections before use. • Do not clean or re-sterilize. • This product is not intended for reuse. • Do not use after expiry date. If over it, please discard it. 	<p> Instruções de uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrir a embalagem individual com os cuidados necessários de assepsia. - Conectar o produto á linha de infusão. - Purgar o sistema. Assegure-se que não existem bolhas de ar no sistema de infusão. - Após o uso, os produtos devem ser descartados de acordo com o regulamento ecológico local. <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sem latex e ftalatos. • Apirogénico. • Dispositivo médico de utilização única. <p>Uso pretendido: Este produto destina-se à condução líquidos com o propósito da sua infusão ou administração no organismo. Os utilizadores pretendidos destes produtos são médicos e enfermeiros.</p> <p>Precauções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não usar se a embalagem individual se encontrar aberta ou danificada. • Não usar se as tampas protetoras não estiverem colocadas. • Verificar todas as conexões antes de utilizar o produto. • Não limpar nem reesterilizar. • Este produto não se destina a ser reutilizado. • Não usar após a data de validade. Se ultrapassada, descartar o produto. 	<p> Gebrauchsanweisung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffnen Sie die einzelne Produktverpackung mit aller Sorgfalt unter aseptischen Bedingungen. - Schließen Sie die erforderliche Infusionsleitung an. - Spülen Sie das System. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Infusionssystem befinden. - Entsorgen Sie die Produkte nach Gebrauch gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften. <p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frei von Latex und Phthalaten. • Nicht pyrogen. • Medizinisches Gerät zum einmaligen Gebrauch. <p>Verwendungszweck: Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Flüssigkeiten zum Zweck der Infusion oder Verabreichung in den Körper zu leiten. Die vorgesehenen Benutzer dieses Produkts sind Ärzte und medizinische Pflegekräfte.</p> <p>Warnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. • Nicht verwenden, wenn die Schutzkappen lose sind oder fehlen. • Überprüfen Sie alle Anschlüsse vor der Verwendung. • Nicht reinigen oder erneut sterilisieren. • Dieses Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt. • Nicht verwenden nach Ablauf des Verfallsdatums. Wenn es abgelaufen ist, entsorgen Sie es bitte.

Used symbol on blister / Símbolos usados na embalagem individual:

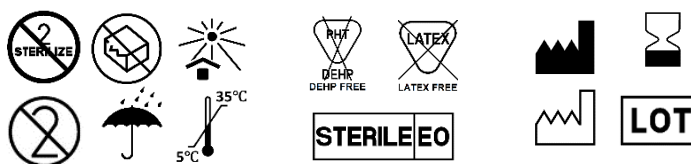

CE 2797