



**Instruções de uso**  
Instructions for use  
Gebrauchsanweisung


**Prolongamentos**  
Extension lines  
Infusionsverlängerungen

PMH-26P-300TF-01

Revisão: 01

EN	PT	DE
<p> <b>Instructions for use:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open the individual product package with all aseptic care.</li> <li>- Connect to the necessary infusion line.</li> <li>- Purge the system. Make sure that there are no air-bubbles in the infusion system.</li> <li>- After use, the products should be disposed of in accordance with local ecological regulations.</li> </ul> <p><b>Characteristics:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Free of latex and phthalates.</li> <li>• Non-pyrogenic.</li> <li>• Medical device for single use.</li> </ul> <p><b>Intended use:</b> This product is intended to channeling liquids for the purpose of infusion or administration into the body. The intended users of this product are physicians and nurses.</p> <p><b>Warnings:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not use if the packaged is opened or damaged.</li> <li>• Do not use if protective caps are loose or missing.</li> <li>• Verify all connections before use.</li> <li>• Do not clean or re-sterilize.</li> <li>• This product is not intended for reuse.</li> <li>• Do not use after expiry date. If over it, please discard it.</li> <li>• This device is not suitable for isopropyl alcohol-based solutions.</li> </ul>	<p> <b>Instruções de uso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abrir a embalagem individual com os cuidados necessários de assepsia.</li> <li>- Conectar o produto á linha de infusão.</li> <li>- Purgar o sistema. Assegure-se que não existem bolhas de ar no sistema de infusão.</li> <li>- Após o uso, os produtos devem ser descartados de acordo com o regulamento ecológico local.</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sem latex e ftalatos.</li> <li>• Apirogénico.</li> <li>• Dispositivo médico de utilização única.</li> </ul> <p><b>Uso pretendido:</b> Este produto destina-se à condução líquidos com o propósito da sua infusão ou administração no organismo. Os utilizadores pretendidos destes produtos são médicos e enfermeiros.</p> <p><b>Precauções:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não usar se a embalagem individual se encontrar aberta ou danificada.</li> <li>• Não usar se as tampas protetoras não estiverem colocadas.</li> <li>• Verificar todas as conexões antes de utilizar o produto.</li> <li>• Não limpar nem reesterilizar.</li> <li>• Este produto não se destina a ser reutilizado.</li> <li>• Não usar após a data de validade. Se ultrapassada, descartar o produto.</li> <li>• Este dispositivo não é adequado para desinfeção com soluções álcool isopropílico</li> </ul>	<p> <b>Gebrauchsanweisung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffnen Sie die einzelne Produktverpackung mit aller Sorgfalt unter aseptischen Bedingungen.</li> <li>- Schließen Sie die erforderliche Infusionsleitung an.</li> <li>- Spülen Sie das System. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Infusionssystem befinden.</li> <li>- Entsorgen Sie die Produkte nach Gebrauch gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.</li> </ul> <p><b>Merkmale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frei von Latex und Phthalaten.</li> <li>• Nicht pyrogen.</li> <li>• Medizinisches Gerät zum einmaligen Gebrauch.</li> </ul> <p><b>Verwendungszweck:</b> Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Flüssigkeiten zum Zweck der Infusion oder Verabreichung in den Körper zu leiten. Die vorgesehenen Benutzer dieses Produkts sind Ärzte und medizinische Pflegekräfte.</p> <p><b>Warnungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.</li> <li>• Nicht verwenden, wenn die Schutzkappen lose sind oder fehlen.</li> <li>• Überprüfen Sie alle Anschlüsse vor der Verwendung.</li> <li>• Nicht reinigen oder erneut sterilisieren.</li> <li>• Dieses Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt.</li> <li>• Nicht verwenden nach Ablauf des Verfallsdatums. Wenn es abgelaufen ist, entsorgen Sie es bitte.</li> <li>• Dieses Produkt ist nicht für Lösungen auf Isopropylalkoholbasis geeignet</li> </ul>

**Used symbol on blister / Símbolos usados na embalagem individual:**

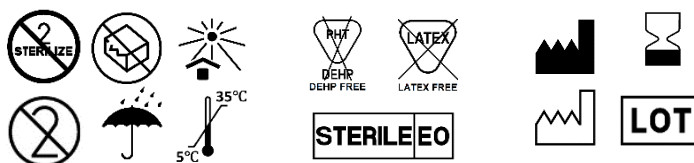

**CE 2797**

