


Os sacos coletores de urina devem ser trocados semanalmente, no caso de saco com torneira; diariamente, no caso de saco sem torneira; ou se apresentarem alterações da cor e/ou mau cheiro, se apresentarem fuga ou estiverem danificados.

- 1) Lavar e desinfetar cuidadosamente as mãos.
- 2) Se for possível utilizar luvas de proteção descartáveis.
- 3) Colocar resguardo de proteção.
- 4) Utilizar um clampe para clampar a algália. Nesta impossibilidade dobrar a algália na extremidade de forma a clampar evitando tocar no orifício de conexão de entrada do saco
- 5) Desinfetar com uma compressa e álcool a 70º o local de ligação do saco à algália.
- 6) Puxar o saco segurando firmemente a algália, para evitar lesões no paciente.
- 7) Conectar um novo saco tendo o cuidado de não tocar com a extremidade deste (conector) em nada.
- 8) Retirar a tesoura de clampagem e colocar o saco abaixo do nível da bexiga em suporte próprio.
- 9) Lavar novamente as mãos.

INSTRUÇÕES PARA DESPEJAR O SACO COLETOR DE URINA (COM TORNEIRA)

- 1) Lavar e desinfetar cuidadosamente as mãos;
- 2) Utilizar o sistema de clampagem existente no saco. Se não tiver deve utilizar um clampe para clampar a algália.
- 3) Abrir a torneira para despejar a urina, quando o saco estiver a meio da sua capacidade.
- 4) Despejar para recipiente bem lavado e fechar a torneira.
- 5) Limpar a torneira com compressa.
- 6) Lavar cuidadosamente as mãos.
- 7) Se utilizou luvas deve descartar as luvas e lavar cuidadosamente as mãos.

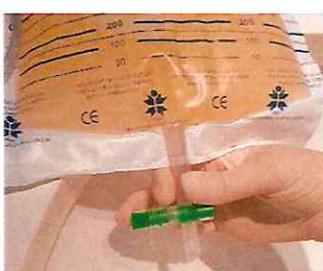

CUIDADOS ADICIONAIS A TER:

- 1) Fixar a algália com adesivo, de preferência antialérgico.
 - 1.1. No homem deverá ser fixada na região superior da coxa ou na região infra-abdominal. A fixação deverá ser mudada consoante o posicionamento, isto é, se estiver virado para o lado direito fixar na esquerda ou vice-versa.
 - 1.2. Na mulher, fixar na face interna da coxa.
 - 1.3. Ao fixar a algália usar dois adesivos: a 1.º cola na pele e o 2.º fixa a algália ao 1.º.



INSTRUÇÕES DE USO PARA SACOS DE URINA

PMH-26P-400TF-03

N.a.: N/A | REV: 00

Data de Implementação: 02/10/2023

- 2) O tubo do saco de urina não deve ter nada a obstruí-lo, nem estar dobrado ou por debaixo do corpo, para manter o fluxo de urina.
- 3) Caso a algália se exteriorize, deverá contactar um enfermeiro imediatamente.
- 4) Vigie as características da urina (cheiro, cor e quantidade); vigie alterações (presença de mau cheiro, coloração ou turvação) e esteja atento a queixas como dor na bexiga e presença de corrimento. Caso identifique alguma destas alterações contacte imediatamente o médico ou enfermeiro.

Documento elaborado por: Marilene Estanqueiro	Documento revisto e aprovado por: Cristina Coelho
Cargo: Gestora da Qualidade Data: 02/10/2023 	Cargo: Diretora da Qualidade Data: 02/10/2023 