




PMH PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES

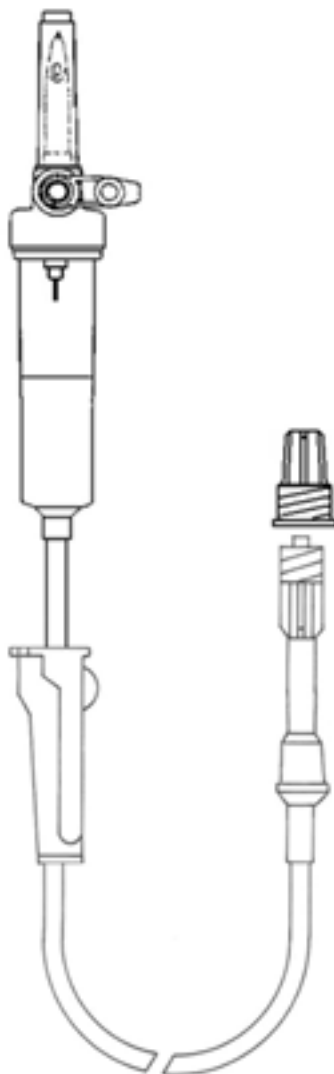

Microdroplet Systems

**SERUM ADMINISTRATION
SYSTEM WITH MICRO-
DROPS (60GTS / ML),
PRECISION RAMP AND
INJECTION POINT WITH
FIXED LUER LOCK, 150CM**

105.0126

Descrição técnica

Infusion administration system with microdroplets (60gts / ml), precision ramp and injection point with fixed luer lock, 150cm

REFERÊNCIA	105.0126
CLASSE	Classe I
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716001267

A cuidar com excelencia desde 1990

na investigação e desenvolvimento de produtos médico hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SYSTEM OF ADMINISTRATION OF MICRO-DROPS SERUMS WITH:

DRILL PROTECTION COVER

BICANAL DRILL WITH EASY AIR DRILL IN BAGS, ERGONOMIC DESIGN - ISO 8536-4

MICRO-DROP CHAMBER 60gts / ml PVC-FREE, TRANSPARENT AND FLEXIBLE ALLOWING CONTINUOUS DRIPPING OBSERVATION

PVC TUBE FREE OF PHALATES AND DEHP, TRANSPARENT 3x4.1mm, 150cm

HIGH PRECISION DEBIT CONTROL RAMP, DESIGN THAT ALLOWS TO MAINTAIN THE PERMEABLE ROUTE, GREATER ADAPTABILITY, GREATER SAFETY, WITH SAFE SYSTEM FOR DISPOSAL.

INJECTION POINT FOR LATEX-FREE RUBBER NEEDLE

LUER LOCK FIXED MALE

LUER LOCK PROTECTION COVER

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

ABS, PE, PP, PVC, POLISOPRENE
FREE FROM DEHP AND PHALATES
LATEX FREE

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURE BETWEEN 0 ° C AND + 40 ° C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

UNIT PACKAGING IN PEEL PACK, STERILE-ETO, EASY TO OPEN, WITH INDICATION OF THE PRODUCT REFERENCE, MANUFACTURING DATE, BATCH NUMBER, EXPIRY DATE, MARKING CE0086, INSTRUCTIONS FOR USE AND APPLICABLE SYMBOLOGY

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


STERILE SINCE NOT OPENED OR DAMAGED. APIROGENIC.
USE ONLY IF THE PROTECTIVE COVERS ARE PLACED

INDICAÇÕES DE USO

SOLUTIONS ADMINISTRATION

PRAZO DE VALIDADE

5 Anos

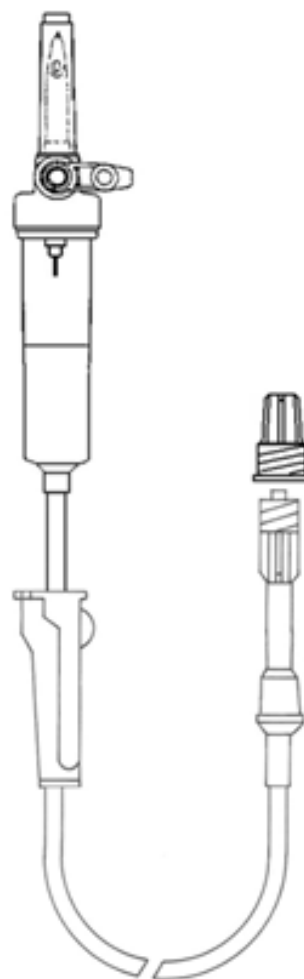

WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA