

With Flow Control Device

**SERUM ADMINISTRATION
SYSTEM WITH 15µM FILTER,
PRECISION RAMP, DEBIT
CONTROLLER, Y
INJECTION POINT AND
FIXED LUER LOCK**

106.0177

Descrição técnica

Infusion administration system with 15µm filter, precision ram, flow controller, Y injection point and fixed luer lock

REFERÊNCIA	106.0177
CLASSE	Classe I
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716001779

A cuidar com excelencia desde 1990

na investigação e desenvolvimento de produtos médico hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERUM ADMINISTRATION SYSTEM WITH:

DRILL PROTECTION COVER

BICANAL DRILL WITH EASY AIR DRILL IN BAGS - ISO 8536-4

PVC-FREE, TRANSPARENT AND FLEXIBLE CHAMBER ALLOWING CONTINUOUS DRIPPING OBSERVATION WITH 15 μ m FILTER.

PVC TUBE FREE OF DEHP AND PHALATES, TRANSPARENT 3.00x4.1mm, 80 + 60 + 20cm. ANTI-TWIST.

HIGH PRECISION DEBIT CONTROL RAMP, DESIGN THAT ALLOWS TO MAINTAIN THE PERMEABLE ROUTE, GREATER ADAPTABILITY, GREATER SAFETY, WITH SAFE SYSTEM FOR DISPOSAL.

DEBIT CONTROLLER WITH A SCALE UP TO APPROX.250ml / h; CALIBRATED FOR A 80cm CHAMBER POSITION, IDEAL OPERATING HEIGHT

Y-INJECTION POINT FOR NEEDLE USE;

FIXED LUER LOCK

FIXED LUER LOCK PROTECTION COVER

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

ABS, PE, PP, PVC

FREE FROM DEHP AND PHALATES

LATEX FREE

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURE BETWEEN 0 ° C AND + 40 ° C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

UNIT PACKAGING IN PEEL PACK, STERILE-ETO, EASY TO OPEN, WITH INDICATION OF THE PRODUCT REFERENCE, MANUFACTURING DATE, BATCH NUMBER, EXPIRY DATE, MARKING CE0086, INSTRUCTIONS FOR USE AND APPLICABLE SYMBOLOGY

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

DO NOT USE WITH BLOOD;

THE DEBIT MUST BE CONFIRMED BY COUNTING NO.

DROPS (SPECIAL ATTENTION TO CYTOOTOXINS, MORPHINES, ...);

IT IS IMPORTANT NOT TO LEAVE THE REGULATOR NEAR "OPEN". IN THIS POSITION, FLOW CAN RISE QUICKLY UP TO 2,500 ML / H.


STERILE SINCE

INDICAÇÕES DE USO

ADMINISTRATION OF SOLUTIONS WITH FLOW CONTROLLER

PRAZO DE VALIDADE

5 Anos

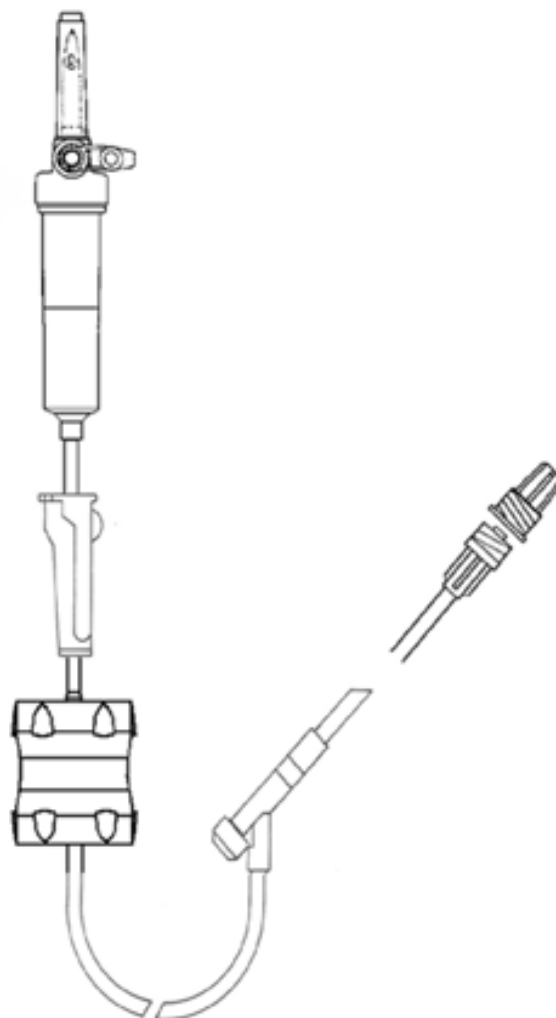

WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA