

Perfuradores

**MINI PERFURADOR  
BICANAL COM VÁLVULA  
BIDIRECIONAL  
TRANSPARENTE COM  
MEMBRANA PARA  
DESINFEÇÃO**

803.2428

Descrição técnica

Mini perfurador bicanal com válvula bidirecional transparente com membrana para desinfecção

REFERÊNCIA	803.2428
CLASSE	Classe
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716024284

***A cuidar com excelencia desde 1990***

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFURADOR BICANAL COM:

TAMPA PARA PROTEÇÃO DE PERFURADOR

MINI PERFURADOR BICANAL COM AREJADOR DE FÁCIL PERFURAÇÃO NO SACO/FRASCO, DESIGN ERGONÓMICO

PONTO DE INJEÇÃO COM VÁLVULA DE BIOSSEGURANÇA, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA.

TAMPA VERMELHA PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA

## PERFURADORES

NÚMERO DE PEÇAS	2, das quais 1 move-se no acesso luer.
PESO	1.18g
SEQUÊNCIA CLAMPAGEM	Não necessário
TAXA FLUXO	160 ml/min
FLUIDO RESIDUAL EXTERNO NA DESCONEXÃO	Mínimo
PERCURSO FLUXO	Direto através da cânula de policarbonato
PEÇAS MOVÍVEIS NO PERCURSO DO FLUXO	Não
TECNOLOGIA BASE	Selo de silicone e cânula interna. Janela interna da cânula é exposta pela inserção de um luer macho e a cânula entra no espaço interno do luer para alcançar o fluxo.
COMPRIMENTO	26,50mm
VOLUME RESIDUAL	0.03ml
CONTÉM LATEX	Não
CONTÉM METAL	Não
COMPATIBILIDADE ALTA PRESSÃO	600 psi
DESCONEXÃO	Neutro: 0 a -0.005ml

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### COMPOSIÇÃO

PE, ABS, PP, PVDF

SILICONE + POLICARBONATO RESISTENTE A LÍPIDOS

ISENTO DE DEHP E FTALATOS

ISENTO DE LÁTEX

### CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 150 DIMENSÕES CAIXA (CM):

COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2 PESO

CAIXA (KG): ± 1,950

### CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

### CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


ESTÉRIL DESDE QUE NÃO ABERTO, NEM DANIFICADO.

### INDICAÇÕES DE USO

TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES

### PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS

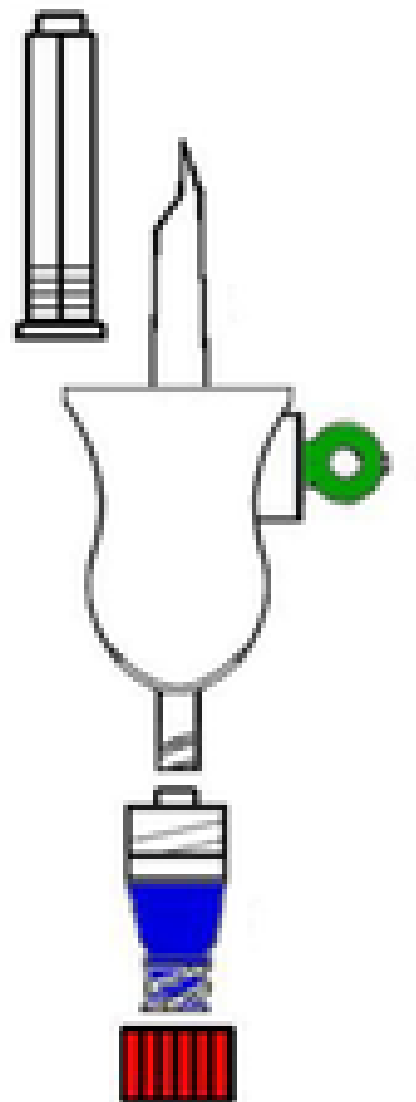

**WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680**

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES  
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9  
2135-327 SAMORA CORREIA