



Válvulas

VÁLVULA BIDIRECIONAL TRANSPARENTE

806.2897

Descrição técnica

Válvula Bidirecional Transparente

REFERÊNCIA	806.2897
CLASSE	Classe
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716028978

A cuidar com excelencia desde 1990

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

VÁLVULAS

TECNOLOGIA BASE	Selo de silicone e cânula interna. Janela interna da cânula é exposta pela inserção de um luer macho e a cânula entra no espaço interno do luer para alcançar o fluxo.
COMPATIBILIDADE ALTA PRESSÃO	600 psi
CONTÉM LATEX	Não
SEQUÊNCIA CLAMPAGEM	Não necessário
DESCONEXÃO	Neutro: 0 a -0.003ml
NÚMERO DE PEÇAS	2, das quais 1 move-se no acesso luer.
PERCURSO FLUXO	Direto através da cânula de policarbonato
VOLUME RESIDUAL	0.01ml
TAXA FLUXO	110 ml/min
CONTÉM METAL	Não
PEÇAS MOVÍVEIS NO PERCURSO DO FLUXO	Não
FLUIDO RESIDUAL EXTERNO NA DESCONEXÃO	Mínimo
PESO	1.195g
COMPRIMENTO	26,50mm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

SILICONE + POLICARBONATO RESISTENTE A LÍPIDOS
ISENTO DE DEHP E FTALATOS
ISENTO DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 200
DIMENSÕES CAIXA (CM):
COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2
PESO CAIXA (KG): ± 1

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE -5°C E 30°C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


ESTÉRIL DESDE QUE NÃO ABERTO, NEM DANIFICADO.

INDICAÇÕES DE USO

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM VÁLVULA DE BIOSSEGURANÇA

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS

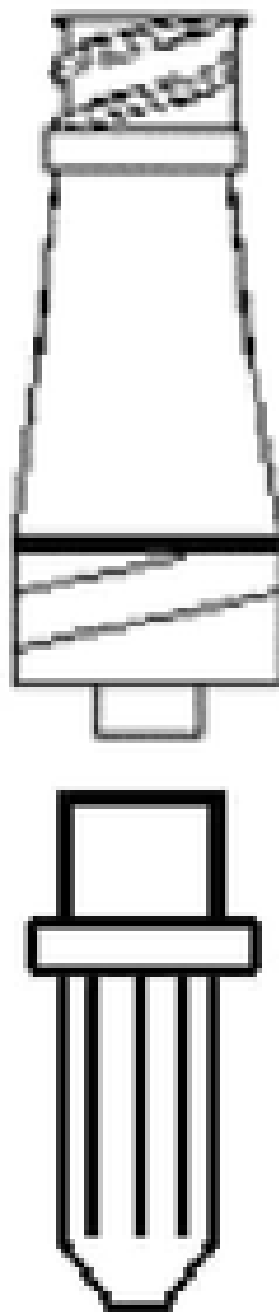

WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA

